


# オゼンピック®皮下注2mgを正しく使うために **ダイジェスト版**

オゼンピック®皮下注2mgを使用される方へ

監修:新潟薬科大学薬学部 臨床薬学教育研究センター センター長 教授 朝倉 俊成 先生

## 注射針の取り付け 手指を石けんでよく洗ってください。


1 オゼンピック®のキャップをはずし、ゴム栓をアルコール綿で拭きます。

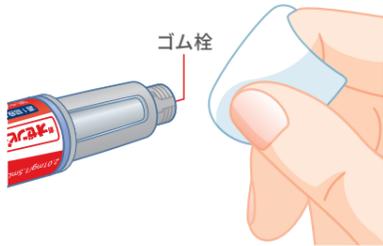


2 注射針をゴム栓にまっすぐ奥まで刺し、止まるまで回します。

注射針の保護シールをはがしたら後針が曲がっているなどの異常がないか、確認します。

後針

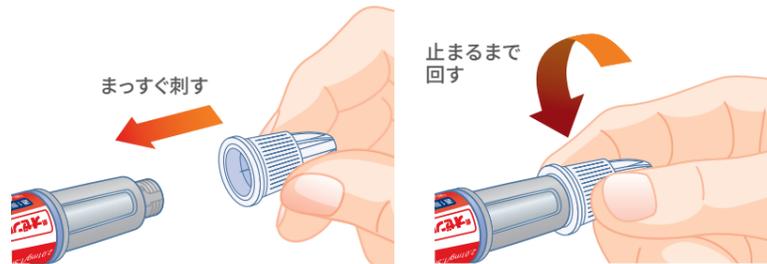

3 「針ケース」と「針キャップ」をまっすぐ引っぱってはずします。

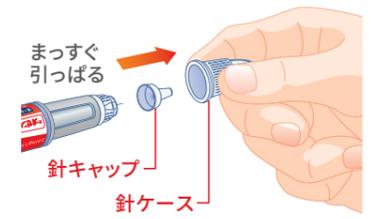

新しいペンを使用する場合


ペンの使用が2回目以降の場合

## 新しいペンを使用する前に

動作確認

2回目以降は動作確認は不要です。


a ダイヤル表示が「0」であることを確認したうえで、ダイヤルを「点線目盛(0のすぐ後)」に設定します。

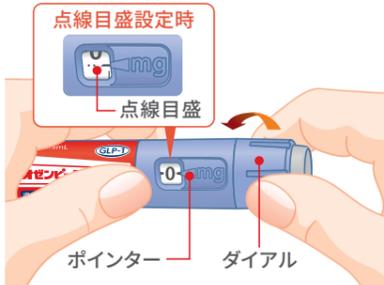

b カートリッジ内の気泡を上部に集めます。



c 針先を上に向けたまま、注入ボタンを押し込みます。

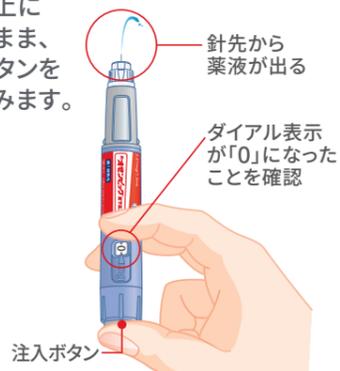


## 投与量の設定

4 ダイヤル表示が「0」になっていることを確認のうえ、ダイヤルを回して、指示された量(0.25mg、0.5mg、1.0mgのいずれか)をポインターに合わせます。



## 注射

5 注射部位を消毒し、注射針を皮膚の面に対して、まっすぐに根元まで刺してください。

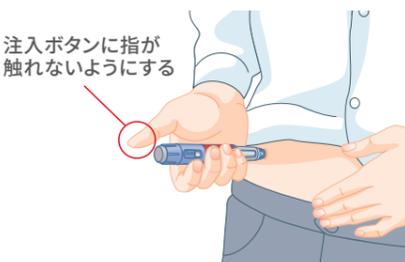


6 「カチッ」と音がするまで注入ボタンを真上から押してください。



7 完全に薬液を注入するため、注入ボタンを押した状態で、6秒以上注射針を刺したままにしてください。




8 注入ボタンを押したまま注射針を抜いてください。

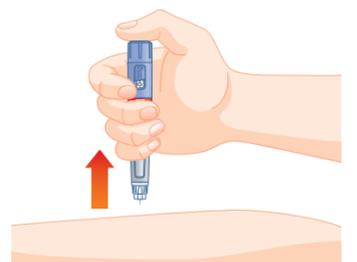

## 注射が終わったら 注射後は必ず直ちに注射針をはずしてください。

9 注射針に「針ケース」をまっすぐつけ、針ケースごと回します。

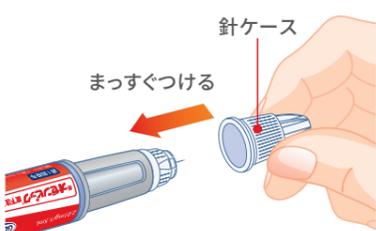


●針キャップはつけないでください。


注射針を針ケースごと回す




10 まっすぐ引っぱって注射針をはずします。

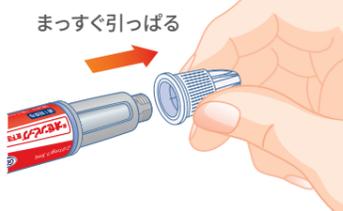

はずした注射針は、後針が折れているなどの異常がないか確認したうえで、**廃棄**します。

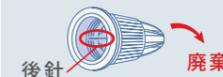

11 ペンにキャップをつけます。

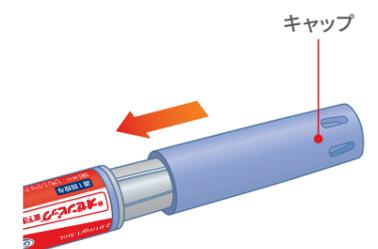

詳細については、製品に添付されている「取扱説明書」をご覧ください。また、自己注射は、医療従事者の指導のもとで行ってください。